


## Opsyon sa Pagbiyak:

Dapat tanggalin ang catheter bago gamitin ang pamamaraang ito.

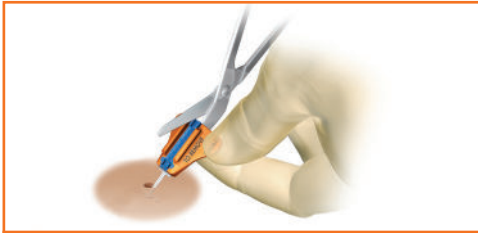


**IKAAPAT NA HAKBANG**

- GUMAMIT ng gunting na may mapurol na dulo upang ganap na gupitin ang base na pakalahating-pahaba sa kahabaan ng asul na uka (groove), habang matatag na hinahawakan ang mga wing
- Ang pagpili ay hahantong sa kakulangan sa ginhawa kaya ang isang tiwalang matatag na hiwa ay mahalaga



**IKALIMANG HAKBANG**

- Maglapat ng mahigpit na presyon sa lugar kung saan ito ipinasok gamit ang isang kamay
- Ang nababaluktot na securement feet ay nakahugis na tulad ng isang "L" na may mga paa na umaabot ng 5mm sa bawat panig ng lugar ng pagpasok

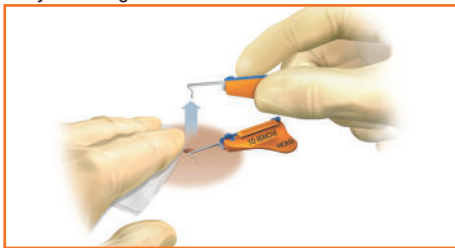

**IKAANIM NA HAKBANG**

- Pihitin ang asul na gilid pataas at gumamit ng mabilis, sadyang pataas na paggalaw upang tanggalin ang bawat paa nang hiwalay ayon sa hugis ng paa habang may kapit ng traksyon sa balat na malapit sa lugar ng pagpasok



**OPSYONAL**

- Kung may labis na katigasan, bigyan ng nakapirming presyon sa paa gamit ang isang daliri sa lugar ng pagpasok
- Hilahin ang paa laban sa presyon ng iyong daliri upang ituwid ang nababaluktot na paa habang nilalabanan no ito
- Ang paa ng nitinol ay idinisenyo upang ibaluktot sa labas ng lugar nang walang pinsala sa tisyu

**SecurAcath 24-Oras na Suportang Klinikal:**

**800-225-0000**

Inilagay ni: \_\_\_\_\_

Pasyente: \_\_\_\_\_

Petsa ng Kapanganakan/ID: \_\_\_\_\_

Petsa ng paglagay: \_\_\_\_\_

Lot Blg: \_\_\_\_\_

Kabuuang Haba ng Catheter:(cm) \_\_\_\_\_

Panlabas na Haba:(cm) \_\_\_\_\_

Ang kumpletong impormasyon at mga tagubilin para sa paggamit ay matatagpuan sa [www.securacath.com](http://www.securacath.com)





© 2022 ng Interrad Medical, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan  
1329-034 Rev F



I-download ang SecurAcath® app



## Impormasyon at Gabay sa Pangangalaga at Pagpapanatili ng Pasyente

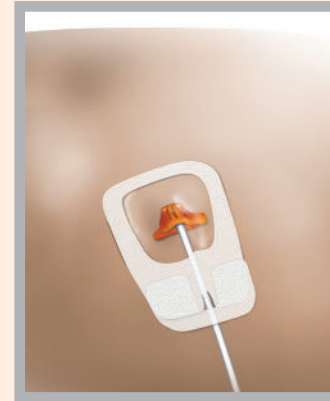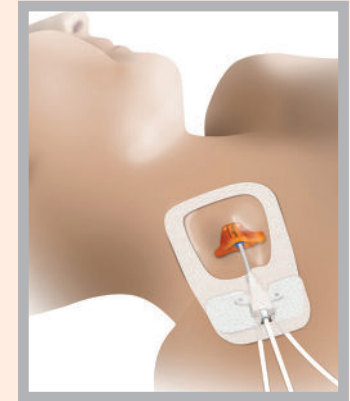

# securAcath.

*For the Life of the Line*




# Ang iyong catheter ay sinigurado gamit ang SecurAcath® subcutaneous securement device

## Tungkol sa SecurAcath Device:

- Ang SecurAcath ay may maliit, mapuro, nababaluktot na mahigpit na nakakabit na paa (securement feet) sa ilalim ng balat na kumikilos upang patatagin ang catheter kung saan mismo ito pumapasok sa katawan
- Ang SecurAcath ay idinisenyo upang matiyak na matatag ang catheter para sa buong tagal ng therapy, mawala ang paggalaw o pagkaalis sa lugar ng catheter, at maiwasan ang pagkaantala ng therapy
- Maaari kang magkaroon ng isang MRI na mayroong SecurAcath sa lugar
- Hindi kailangang baguhin ang SecurAcath. Isaalang-alang ito na bahagi ng catheter
- Ang SecurAcath ay aalisin kapag ang catheter ay tinanggal

## Pangangalaga at Pagpapanatili:

- Sundin ang mga protokol ng iyong tagapagreseta para sa pangangalaga sa site ng catheter.
- Dapat malaman ng iyong tagapagbigay ng pangangalaga ang tungkol sa SecurAcath bago gumawa ng pagpapalit ng benda (dressing).

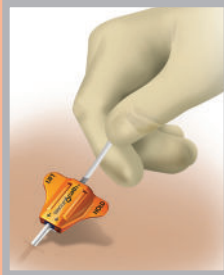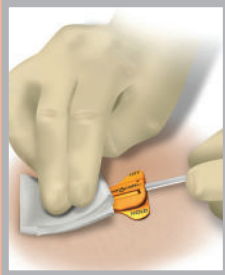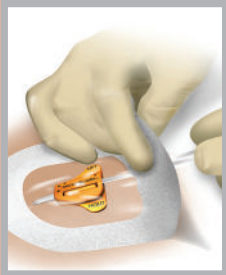

Alisin ang benda ayon sa protokol ng ospital; gumamit ng pangtanggap ng dikit (adhesive remover) kung kinakailangan. Huwag tanggalin ang takip ng SecurAcath sa panahon ng pagpapalit ng benda.

Kung may kanal (drainage) o dugo sa lugar o sa SecurAcath, gumamit ng may asin (saline) na binabad na gasa upang linisin at tanggalin ito at siguraduhin na ang aparato ay nakikitang malinis at tuyo.

Dahan-dahang iangat ang catheter at SecurAcath, tulad ng isang bisagra, upang linisin ang paligid ng lugar ng pinagpapasukan ng catheter. Huwag pilipitin o paikutin ang SecurAcath mula sa orihinal nitong oryentasyon.

Habang nakataas pa rin, gumamit ng antiseptic agent upang linisin ang 360 degrees sa paligid ng lugar, catheter at SecurAcath. Hayaang matuyo nang lubusan ang balat.

- Pllagay ang isang transparent at medyo natatagusang benda (semi-permeable transparent dressing) nang medyo maluwag. Kung ang benda ay inilapat nang masyadong mahigpit, maaari itong maging sanhi ng kawalan ng ginhawa
- Dapat na takpan ng transparent na benda ang lugar ng pinagpapasukan, ang SecurAcath, at mga catheter suture wing. Ang mga pinalawig na tubo (extension tube) lamang ang dapat na nasa labas ng benda upang maiwasan ang pagkahila o pagkapilipit ng catheter.
- Kung may anumang masakit sa lugar kung saan ito ipinasok, subukang palitan ang benda. Siguraduhin na ang SecurAcath ay nakahiga nang patag sa balat at hindi nalipat mula sa orihinal nitong posisyon. Palitan ang transparent na benda, siguraduhing hindi ito masyadong masikip
- Kung ang catheter o SecurAcath ay lumipat mula sa orihinal na pagkakalagay, makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan

## Pagtanggap: Isasagawa ng sinanay na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan



UNANG HAKBANG



IKALAWANG HAKBANG



IKATLONG HAKBANG

- Itaas ang SecurAcath mula sa pasyente
- Mahigpit na hawakan ang HOLD na tab gamit ang hinlalaki at daliri ng isang kamay upang patatagin ang mga wing ng SecurAcath

- Sikwatin paitaas sa gilid ng LIFT gamit ang isang kamay upang matanggal ang takip mula sa base (Tulad ng pagbubukas ng isang lata ng soda)
- Iwasan ang pagpilipit sa base habang tinatanggal ang takip. Ang pagpilipit ay magpapagalaw sa mga paa sa ilalim ng balat at magiging hindi komportable para sa iyong pasyente

- Alisin ang catheter — huwag gumamit ng labis na puwersa.
- Pindutin ang presyon sa lugar upang makamit ang hemostasis



Mag-scan Para sa Mga Video

## Opsyon sa Pagtutupi: Maaaring gamitin nang mayroon o walang catheter sa lugar.



IKAAPAT NA HAKBANG

### MGA NAKATUTULONG NA PAHIWATIG

- Gumamit ng gasang nababad sa tubig na may asin kung ang lugar ng pagpasok ay matatag o ang langib ay naroroon.
- Maaaring gumamit ng analgesic upang pamanahin ang lugar upang maalis ang paghihirap sa panahon ng pag-aalis ng angkla kung ang pasyente ay lubos na sensitibo sa sakit.
- Ang matatag na presyon sa lugar upang mapanatili ang tisyu (tissue) ay nagpapahintulot para sa mas madaling pag-aalis.
- May pagkukusang alisin ang mga paa — na sinusunod ang hugis ng paa.
- Ang kakulangan sa ginhawa ng pasyente ay mababawasan o matatanggal kapag ang paa ng SecurAcath ay mabilis na naalis, nang walang pagpipilipit o pag-aalangan



IKALIMANG HAKBANG

- Hawakan ang nakatiklop na base na pahalang sa balat
- Gumamit ng madaliang, sinasadyang pataas na paggalaw upang tanggalin ayon sa hugis ng mga paa

↓ **Ipinagpatuloy sa likod para sa Impormasyon sa Opsyon sa Pagbiyak** ↓